

# 看護・介護



<https://humanbody.jp/>

人体模型・医学模型・医療シミュレーターなどの詳細、最新情報はヒューマンボディwebサイトをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス  
〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-20-5 D101  
TEL : 029-846-1176 FAX : 029-846-1184

# 看護・介護

**+** 一般看護・臨床看護のトレーニングができる，看護マネキンのベストセラーがリニューアル！



## デラックス看護用シミュレーター，内臓付

このマネキンによって次の実習ができます：

- 全身清拭
- 口腔内洗浄（一部の歯は取り外し可能）
- 患者の体位変換，移動
- 包帯法（切断肢包帯を含む）と着替え
- 洗浄法（目，耳，鼻，胃，腸，膀胱）
- 注射（筋肉と皮下注射）
- 経管栄養法
- 酸素吸入，人工呼吸
- 気管切開口処置
- 尿道カテーテル挿入（男女）
- ストーマケア（結腸切開術）
- 浣腸

### 新規追加：

- 傷口の処置とケア（裂傷と擦り傷）
- 糖尿病足病変のケア
- 頭髮のケア（洗髪，ブラッシング，乾燥）
- 手術部のケア
- 褥瘡ケア（ステージII～IV）

基本的介護から，臨床看護までの幅広い看護テクニックの練習に対応する，看護シミュレーターの世界的ベストセラーです。

丈夫で壊れにくく，水に強いプラスチックから作られていて，可動性も豊かです。頸，腕，脚などの関節は自然な動きが容易で，腰の動きもフレキシブルなため，直角に座らせる事ができます。

付属している内臓（肺，心臓，胃，膀胱と腸管）は脱着式になっており，洗浄しやすいように排水口が付いています。膀胱と腸管は完全防水で，外生殖器（男女交換可）と接続することで導尿法が練習できます。


注射を打つ位置には，交換可能な専用パッド（6ヶ所）を埋め込めるようになっていて，繰り返して使用できます。膝下切断の状態も再現できているので，包帯法も学習できます。

その他の付属品： 腸管チューブ，カテーテル，十二指腸ゾンデ，滑石粉（タルクパウダー），ワセリン，潤滑剤付。

174 cm; 21.0 kg

説明書言語：英・独・日，ほか

品番：P10/1

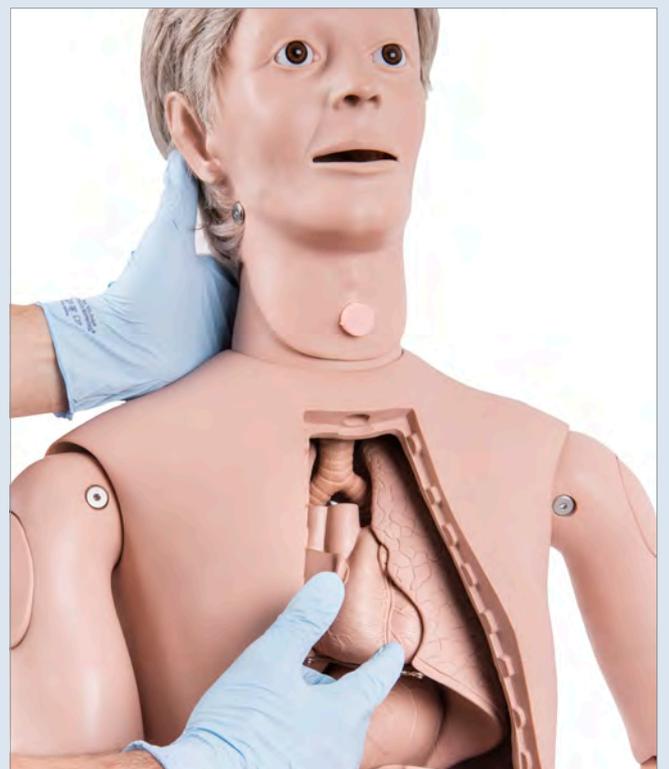

## ベーシック看護／介護用シミュレーター

ベストセラーであるP10/1の内臓部を省いたシンプルなモデルで、主に老人介護と基本的患者ケアの練習に適しています。経管栄養法、内臓の洗浄、ストーマケア、カテーテル挿入、洗腸以外はP10/1と同様の実習ができます。

174 cm; 14.4 kg

説明書言語：英・独・日、ほか

品番：P11/1



## P11/1用グレードアップキット

本キットに含まれる内臓をP11に加えて、より練習項目の豊富なP10/1へとグレードアップすることができます。

3.0 kg

品番：P19



傷口の処置とケア（裂傷と擦り傷）




組立は簡単



糖尿病性足病変



頭髮のケア（洗髪、ブラッシング、乾燥）

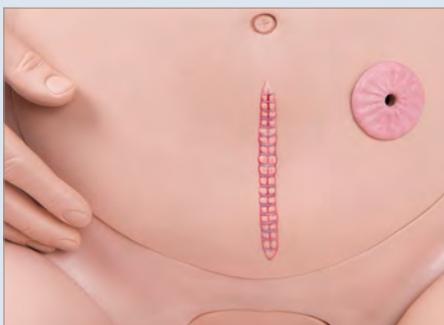

手術部のケア



褥瘡ケア（ステージII～IV）

P10/1, P11/1共通パーツ	品番
脚部の切断端	XP016
頭部	XP001/1
穿刺パッド, 6枚入り	XP017
気管切開開口部の蓋	XP018
胸部カバー	XP005
歯列	XP003
前腕, 手付	左: XP011 右: XP009
大腿	左: XP014 右: XP012/1
上腕	左: XP010 右: XP008
下腿, 足付	左: XP015 右: XP013/1

P10/1専用パーツ	品番
女性生殖器, 膀胱付き	XP035
男性生殖器, 膀胱付き	XP036
肺	XP030
心臓	XP031
膀胱	XP034
腸	XP033
胃	XP032

パーツは以前のモデル（P10, P11）にも使用できます

## ＋ 看護マネキン，ケリーとジェリ

### ケリー成人看護シミュレーターII

男女の性器が交換可能なシミュレーターで、ホクロと皮膚がん、瞳孔の散大と縮小、褥瘡（ステージI）などが確認できます。

以下の練習が可能です：

- ・清拭
- ・義歯の取付・取外し
- ・補聴器の取付け
- ・指・つま先を含めた包帯法の練習
- ・筋肉注射（腕・大腿・殿部）
- ・鼻腔洗浄
- ・胃洗浄・吸引器具のケア
- ・気管切開ケア
- ・服の着せ替え
- ・耳の洗浄
- ・眼洗浄
- ・ヘアケア（洗髪・くし入れ）
- ・口腔洗浄
- ・ストーマケア
- ・移動・体位変換

146 cm; 13 kg

説明書言語：英

品番：W44075

ケリー



各製品の機能は145ページに記載

ケリー成人看護シミュレーターI 品番：1020187

ケリー成人看護シミュレーターII 品番：W44075

ケリー成人看護シミュレーターIII 品番：W44403

ケリー成人看護シミュレーターIV 品番：1020147

ジェリ老人看護シミュレーターI 品番：W44077

ジェリ老人看護シミュレーターII 品番：W44021

ジェリ老人看護シミュレーターIII 品番：W44046

ジェリ老人看護シミュレーターIV 品番：1020146

ジェリ

### アップグレードキット

#### ケリー／ジェリ看護シミュレーター用創傷キット（写真掲載なし）

ケリーおよびジェリ看護シミュレーターに取り付けて使用する創傷キットです。様々な疾患、褥瘡および外科手術による創傷が含まれており、多様な看護実習のシナリオを演出します。汗や嘔吐などを再現するための臭いスプレーが付属しています。説明書言語：英


品番：W44784

#### ケリー／ジェリ看護シミュレーター用褥瘡足モデル（写真掲載なし）


圧力のかかる部位（踵、つま先、指間、あるいは骨が突出し、靴下、靴、ベッドシーツなどと擦れる部位）に褥瘡がでやすいことを確認できます。足モデルにはステージI～IVまでの褥瘡が表示され、ケリーおよびジェリ看護シミュレーターに簡単に取り付けられます。

説明書言語：英

品番：W44784F

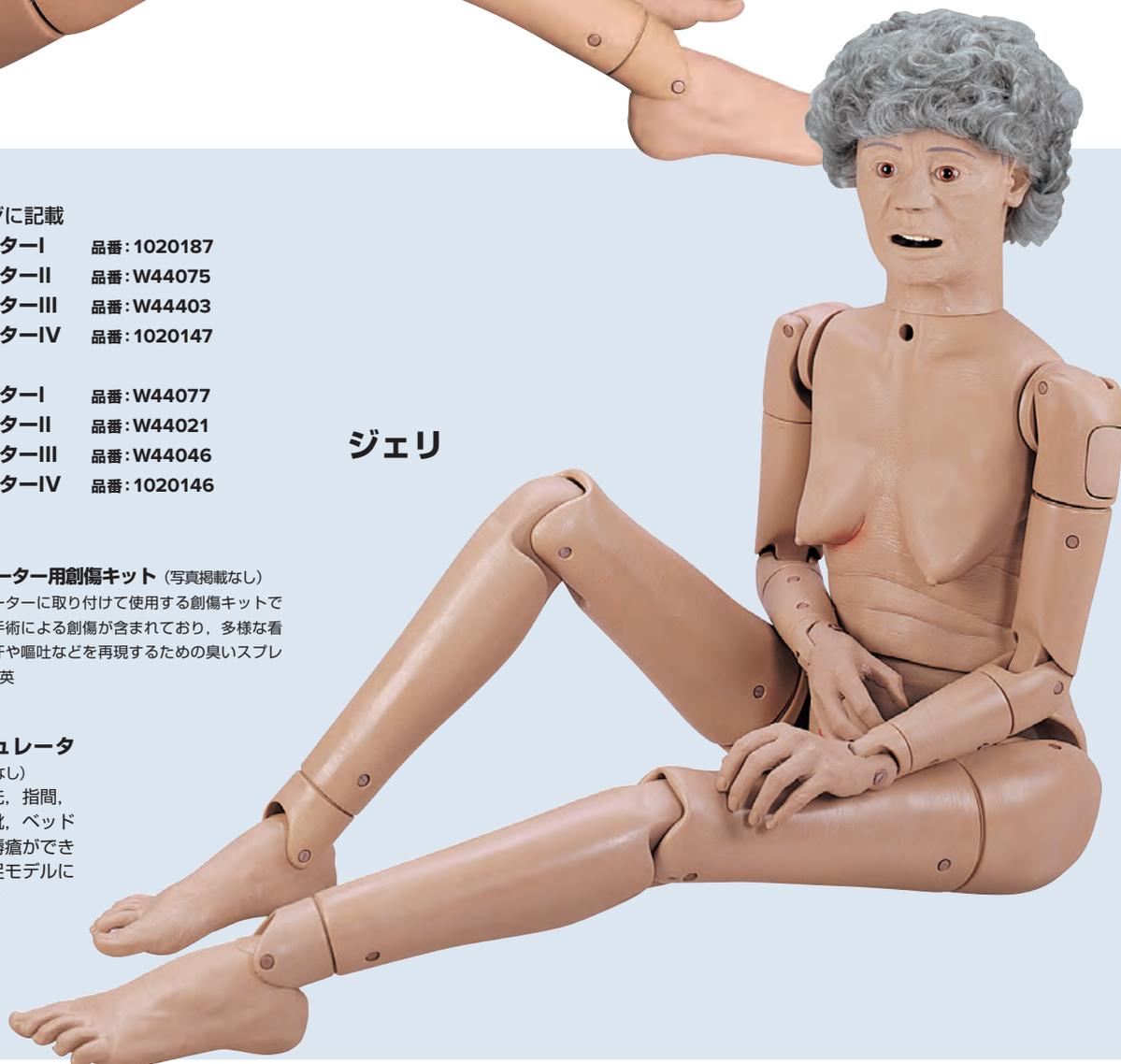

	ケリー ジェリI	ケリーII ジェリII	ケリーIII ジェリIII	ケリーIV ジェリIV
皮膚の異常観察と褥瘡ケア	●	●	●	●
包帯法	●	●	●	●
清拭	●	●	●	●
義歯の取付・取外し	●	●	●	●
補聴器の取付け	●	●	●	●
耳・眼の洗浄	●	●	●	●
ストーマケア	●	●	●	●
移動・体位変換	●	●	●	●
会陰清拭	●	●	●	●
筋肉注射	●	●	●	●
胃洗浄		●	●	●
パップテスト		●	●	●
浣腸		●	●	●
前立腺検査		●	●	●
導尿		●	●	●
鼻腔栄養チューブの設置		●	●	●
静脈穿刺			●	●
血圧測定			●	●
心音の聴診				●
肺音の聴診				●

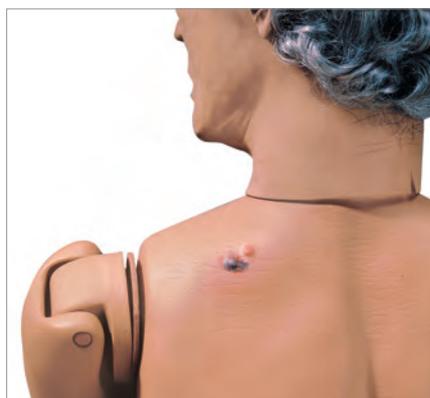

オプション/交換部品	品番
ジェリ頭部パーツ	W99999-231
ケリー頭部パーツ	1019743
ジェリ女性頭髪	W44404
縮小した瞳孔	1019723
散大した瞳孔	1019722
補聴器	1019745
上腕	1019728
肘	1019729
前腕	1019730
右手	W44202
左手	W44201
右腕セット	1016665
左腕セット	W99999-564
静脈注射用右腕	W44075IV
血圧測定用左腕	W44075BP

オプション/交換部品	品番
右脚セット	1019746
左脚足セット	1019747
浮腫のある足	W99999-466
足首	1019736
ケリー胴体上部	1019737
ジェリ胴体上部	W44213
男性生殖器	W44210
女性生殖器	W44209
静脈注射部皮膚・血管交換キット	W99999-866
血液タンク	1019748
経腸タンク	1019749
ストーマセット	1019627
スピーカー	W44413
ハードキャリングケース	W44150



#### 看護・BLSシミュレーター

様々な蘇生法と看護技術が練習できます。

- ・口腔内と入れ歯の洗浄
- ・腕部と臀部の静脈、皮下への穿刺。
- ・ストーマケア（結腸造瘻、回腸造瘻、恥骨上造瘻を設置、それぞれ内部タンクと接続されています。）
- ・胃の洗浄・栄養
- ・男性／女性のカテーテル導尿
- ・浣腸
- ・膣洗浄、パパニコロー塗抹の練習
- ・乳房の触診（男性胸部と七つの異常な女性胸部が交換可能）
- ・標準的な心肺蘇生法およびカウンターパルセーション法による練習
- ・人工呼吸の練習
- ・経口挿管
- ・頸動脈触診
- ・また次の様な特徴があります。
- ・二つの褥瘡潰瘍
- ・まぶたは開放でき、片側の瞳孔は散大
- ・CPRモニター（圧迫と息を吹き込む際のリズムと深さを表示）

Omni<sup>®</sup> Code Blue<sup>®</sup> バック、使い捨てエアウェイ10個、頸部用器具、キャリングバッグ付。

110x56x36 cm; 25.0 kg

説明書言語：英・日

品番：W45001



#### クリニカル・クロー看護シミュレーター

基本的な看護の練習が行えるベーシックモデル。以下の練習が可能です。

- ・一般看護
- ・注射（腕、大腿、臀部に筋肉注射部位）
- ・乳房触診
- ・気管切開チューブの設置
- ・膣洗浄およびパパニコロー塗抹の練習

品番：W45052

#### クリニカル・クロー上級看護シミュレーター

上級レベルの看護技術練習が行えるマネキンです。柔らかく本物のような顔の皮膚と可動型関節で、非常にリアルなトレーニングを経験できます。

- ・一般看護
  - ・胸部触診（女性用および男性用インサート、異常乳房1個付）
  - ・付属のOmni<sup>®</sup>コントローラーを使いCPRモニタリング
  - ・気管切開チューブの設置
  - ・注射部位（静脈・筋肉・皮下穿刺のトレーニングができる腕および手）
  - ・膣洗浄およびパパニコロー塗抹
- 内臓タンクは取り外し可能で、接続部は留め具で密閉可能です。

キャリングバッグ付属

品番：W45071

#### 高齢者の聴力・視力・握力、身体機能を体感



#### 新お年寄り体験スーツ

老化にともない、身体はさまざまに変化し、日常生活を過ごす上で大きく影響してきます。

「新お年寄り体験スーツ」は、こうした変化に伴う身体的な変化をシミュレーションするための体験教材です。

着脱簡単なスーツタイプで、複数の人が体験する「グループでの体験実習」にも最適です。身体変化を経験することで、お年寄りの気持ちを理解し、ケア実習や商品開発に、ぜひご活用ください。

**Sサイズ** 品番：1020111

**Mサイズ** 品番：1020112



### 成人看護用シミュレーター

この実物大人女性モデルは主要な関節が自由に動き、つま先、指先は柔らかくなっています。以下のような基本的な看護練習に最適です。

- ・ 洗髪などヘアケアと手術前のドレーピング
- ・ 沐浴、包帯法
- ・ 口腔内洗浄（あご可動、歯は取り外し可能）
- ・ 眼炎処置（目薬滴下）
- ・ 耳洗浄と耳薬の塗布
- ・ 筋肉注射（上肢と殿部）

下肢を取り外してコンパクトな収納が可能。

頸部用装具付き。

167.5x56x30.5 cm; 15.5 kg

説明書言語：英

成人女性看護用シミュレーター 品番：W45057

成人男性看護用シミュレーター 品番：W45070



### 浣腸シミュレーター

殿部表面は柔軟性があり、浣腸時には尻を押し上げて、肛門へのアクセスを容易にします。ポータブルで衛生的、約1リットルの液貯蔵バッグが付いているので、十分なデモンストレーションや実習ができます。また、多人数での練習時には、ドレイン管をつなげて、直接流し台や大きな受け皿などに排液できるので、セッションを中断する必要がありません。ハードキャリングケース、浣腸セットが付いています。

説明書言語：英

品番：W44094

#### 交換部品：

浣腸用潤滑剤 品番：W44100

液貯蔵バッグ 品番：1013186

洗浄液、355ml 品番：W44683



### 人工肛門付き看護シミュレーター

本物のようにやわらかい指、つま先を持ち、四肢が自由に動く実物大人モデルです。次のような重要な基本的看護テクニックの練習が行えます。

- ・ 洗髪などヘアケアの練習と手術前のドレーピング
- ・ 清拭と包帯法
- ・ 口腔内洗浄（あご可動、歯は取り外し可能）
- ・ 眼炎処置（目薬滴下など）
- ・ 筋肉注射（腕、殿部）
- ・ 結腸、回腸、恥骨上ストーマケア
- ・ 経鼻栄養法と鼻腔洗浄
- ・ 男女導尿法
- ・ 浣腸
- ・ 陰部の圧注法と子宮頸癌検査（Pap smear）

109x56x36 cm; 14.0 kg; 説明書言語：英・日

品番：W45011

オプション／交換部品	品番
腕部穿刺部位	W45021
殿部穿刺部位	W45022
イレオストミー	W99999-495
潰瘍のある足	W45016
キャリングバッグ	W45023



### 褥瘡ケアシミュレーター

新素材を使用し74歳の患者から型を取った本製品は、見た目も手触りも本物そっくりです。皮膚の表面は粘着性がなく、包帯の適用と除去が容易におこなえます。

次の褥瘡を再現しています (NPUAP分類2007年版)

- ステージI
- ステージII
- ステージIII (ポケット, トンネル, 皮下脂肪, スラフ)
- 深刻なステージIV (骨露出, ポケット, トンネル, 皮下脂肪, エスカー, スラフ)

また、疑DTI (深部組織損傷), 判定不能の創底までのエスカー/スラフ, 創離開も再現しています。ステージIIIおよびステージIVは、陰圧閉鎖療法や陰圧創傷治療装置を実際に使用して閉鎖包帯法の練習ができるように配置されています。

30x35x15 cm; 2.7 kg

説明書言語: 英

品番: W46500/1



### 足の褥瘡ケアトレーナー

糖尿病により足には褥瘡や様々な病変が起こる場合があります。

このトレーナーでは親指の壊疽が足底から中足骨まで広がっています。足底では足穿孔 (栄養障害性潰瘍) が確認できます。踵にはステージIIIの褥瘡があり、この部分では表皮層は失われ、黒い変色から皮下組織が壊死していることがわかります。製品に脚は含まれません。

品番: 1018815




### 人工肛門ケア・シミュレーター

外観、機能とも精巧な結腸造瘻と回腸造瘻を備えた腹部のモデルです。ストーマの開大や、ストーマ用装具装着のデモンストレーションと練習ができます。結腸造瘻は洗腸可能。シリンジにより、結腸造瘻からは模擬便を、回腸造瘻からは模擬尿をそれぞれ押し出す事ができます。模擬便、キャリングケース付。

45.5x45.5x30.5 cm; 11.0 kg

説明書言語: 英・日

品番: W44010

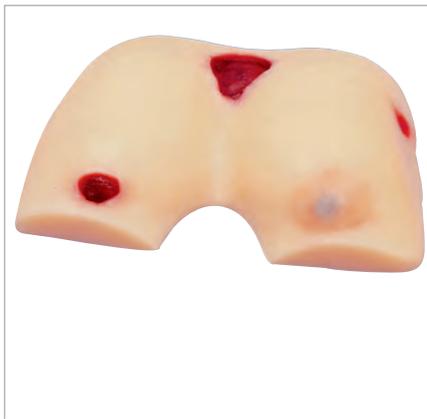

### 褥瘡ケア薄型モデル

I度, II度, III度の褥瘡を示す殿部モデルで、洗浄や着せ替えなどの練習もできます。

20x30x7 cm; 2.4 kg

説明書言語: 英

品番: W43026




### 人工肛門モデル

4個のストーマはローションを塗って指を挿入すると滑らかに広がります。洗腸、皮膚保護剤の貼付、包帯法、パウチ装着等の実習ができます。ローション付き。

33x46 cm

説明書言語: 英

品番: W43027

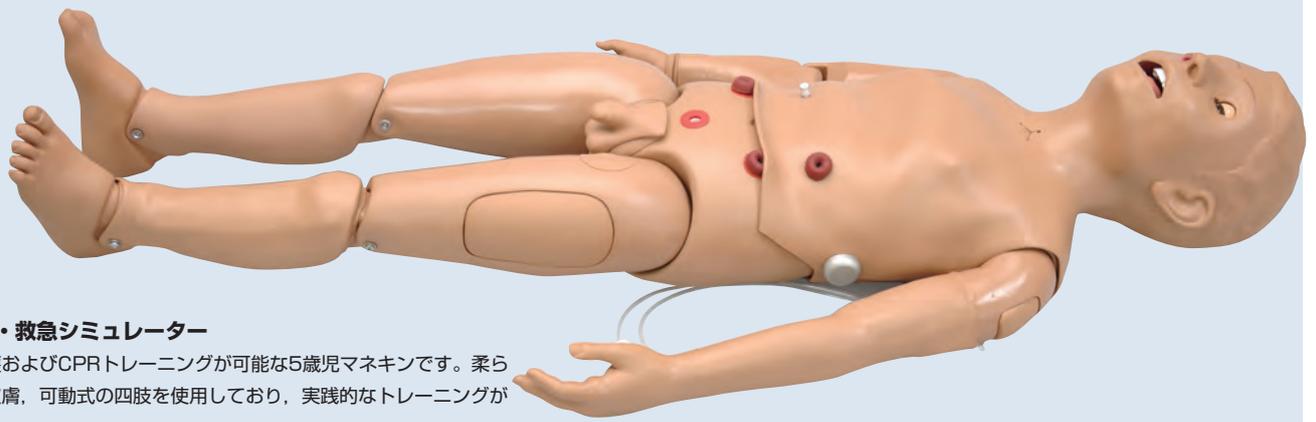

### 小児看護・救急シミュレーター

小児の看護およびCPRトレーニングが可能な5歳児マネキンです。柔らかい顔の皮膚、可動式の四肢を使用しており、実践的なトレーニングが可能です。

#### 看護トレーニング：

- ・眼科処置
- ・胸腔には肺・心臓が収められ、適切な胸骨圧迫時の感触を再現
- ・沐浴、包帯処置
- ・経鼻胃管・経口胃管の設置
- ・胃洗浄
- ・胃チューブ設置
- ・回腸瘻造設、結腸瘻造設、恥骨上膀胱瘻造設の練習
- ・男児・女児カテーテル挿入
- ・浣腸
- ・肛門坐剤の投与
- ・三角筋・大腿上部における筋肉注射

Tシャツ、ショートパンツ、ソフトキャリングバッグ付属

説明書言語：英

品番：W45178

#### 救急トレーニング：

- ・経口・経鼻挿管
- ・経口咽頭チューブ・鼻咽頭チューブの挿管
- ・気管挿管（左右主気管支を再現）
- ・吸引
- ・バッグバルブマスク
- ・胸骨圧迫・顎先挙上
- ・骨内投与
- ・脈拍の触知



### 幼児看護用シミュレーター

肘や膝の関節により、手足や頭を自由に動かすことができる1歳児モデルです。基礎的なトレーニングから小児向けの高度な看護処置まで行えます。

- ・清拭、包帯法
- ・眼の処置
- ・口腔衛生処置（歯・舌付き）
- ・栄養補給管の装着、胃内吸引
- ・筋肉注射（大腿）
- ・男女尿道カテーテル法
- ・浣腸

洋服、頸部用装具、キャリングバック付。

89x38x22.5 cm; 5.0 kg


説明書言語：英

品番：W45062

#### オプション：

静脈注射用アーム 品番：W45032

骨髄穿刺レッグ 品番：W45095

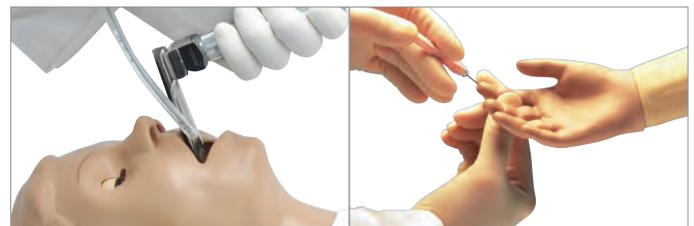

### 小児看護用シミュレーター（5歳児）

腕や足（肘と膝）、頭が関節により自在に動かせる5歳児の実物大モデルです。小児科医療の幅広い看護処置トレーニングができます。

- ・清拭、包帯法
- ・眼炎処置（目薬滴下）
- ・口腔内洗浄（顎可動、歯・舌付き）
- ・栄養補給管の装着、胃内吸引
- ・筋肉注射（大腿上部と肩の三角筋部分）
- ・男女導尿カテーテル法
- ・浣腸

Tシャツ、ショートパンツ、頸部用装具、キャリングバック付き。

119x46x48 cm; 9.1 kg

説明書言語：英

品番：W45085



### 乳児看護トレーニング用モデル、両性型

極めて実際の看護の練習が行える乳児のモデルです。次のような特徴があります。

- ・内臓付（心臓、肺、腸、胃、膀胱）
- ・取り外せる腹部のカバー
- ・女性器と男性器は交換可能
- ・実際の皮膚のように柔らかい耳
- ・可動性豊かな頭部、腕、脚

実習内容：

- ・気管切開に関する看護
- ・尿道カテーテル法（男女）
- ・胃管の挿入
- ・洗腸
- ・大腿部と殿部の筋肉注射と皮下注射
- ・泉門の触診

付属品：注射器、吸引用カテーテル、栄養補給管、導尿カテーテル、尿収集用バッグ、カテーテル用潤滑剤、キャリングバッグ。

52 cm; 2.3 kg

説明書言語：英・独・日、ほか

品番：P30

### 交換部品：

注射用パッド 大腿部と殿部用 品番：XP201



### 早産・低出生体重児ケアシミュレーター マイクロ・プリーミー

およそ10人に1人の割合といわれている低出生体重児。マイクロ・プリーミーでこのとても小さな患者さんのための適切なケアの方法を学ぶことができます。マイクロ・プリーミーは在胎週数25週の超低出生体重児を忠実に再現しています。治療を受けた低出生体重児のケアをする看護師さんや親御さんのトレーニングに役立ちます。また、多胎児や難産を想定したチーム・トレーニングにも最適です。気管内チューブ、鼻腔栄養チューブ、臍帯カテーテル、静脈注射を実際と同様に使用することができる他、胸腔チューブの挿入とストーマケア（排便機能はありません）も可能です。

付属品：神経管欠損症部、臍帯2種、オムツ、帽子（色は変わることがあります）、潤滑剤、3mlシリンジ、25G翼状針投薬セット、模擬血液、排水チューブ3本、呼吸バルブ

身長：約30cm；説明書言語：英

マイクロ・プリーミー

品番：W44754

マイクロ・プリーミー、アフリカ人系

品番：W44754B



### 看護トレーニング用乳児モデル

新生児サイズの乳児モデルです。特別なケアが必要な乳児のための処置や看護計画を作成する教育に役立ちます。経験の浅い看護学生への教育をはじめ、広範なトレーニングに対応しています。

以下の処置の練習が可能です：

- ・気管開口部のケア（洗浄および吸引）
- ・胃瘻ケア（洗浄および経管栄養補給）
- ・経鼻胃管によるケア（留置、洗浄、経管栄養補給および吸引）
- ・尿道カテーテル（挿入、留置およびケア）
- ・人工肛門（基本的なケアのみ）

説明書言語：英

看護トレーニング用乳児モデル，女児 品番：W44707

看護トレーニング用乳児モデル，男児 品番：W44708



### 沐浴ベビーケアモデル，男児

新生児を正確に再現しています。沐浴、おむつ交換、着せ替え、授乳などの実習ができ、妊婦の講習会には大変効果的です。

52 cm; 2.3 kg

説明書言語：英・独・日、ほか

品番：P31



### 新生児ケアトレーナー

生後8週程度の新生児を再現したマネキンで、肩・股関節を動かすことができます。以下のような一般・臨床の新生児看護の練習が可能です：

- ・清拭
- ・包帯法
- ・経管栄養および胃内容吸引
- ・ヒールブリック、フィンガーブリック
- ・男女導尿法
- ・浣腸

Tシャツ、紙おむつ、キャリングバッグ付属

品番：W45055

### オプション：

#### 骨髄穿刺レグ

新生児への脛骨穿刺を練習できます。内部に穿刺可能な脛骨が収められています。脛骨へ穿刺するための解剖学的ランドマークおよび、大腿動脈・静脈を備えています。

品番：W45096



### 乳児ストーマケアトレーナー

乳児ストーマケアトレーナーは、ストーマのある乳児に対する特別なケアについて介護者や親が学べるように作られました。この練習器は、乳児のストーマの洗浄とケア、パウチの交換の練習に役立ちます。実物に近い外観と機能を備えるように、瘻孔部分には軟質材料を使用、付属のシリンジを使用して挿入口から瘻孔内に模擬便を注入できます。模擬便は水を加えてやわらかくすることができます。瘻孔は水を注入して洗浄することができ、模擬便は再使用が可能です。人工肛門バッグ1個、手袋（片手）、3mlシリンジ2本、模擬便30ml、潤滑剤30ml、洗浄用ボトル、収納ケースが付属しています。

説明書言語：英

品番：W44756